



# CardioVex

H O L T E R

**Sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio**



MMC10D



MMC10L

- REGISTRO CONTÍNUO LAS 24/48 HS.
- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- MEMORIA SD EXTRAIBLE
- MÍNIMO TAMAÑO Y PESO
- MENOR CONSUMO DE BATERÍA






# CardioVex

## H O L T E R

### Características del sistema:

- Grabador sin display: Modelo MMC10L
- Grabador con display: Modelo MMC10D
- Análisis de arritmias ECG en los tres canales.
- Almacenamiento del registro en tarjeta de memoria SD extraíble.
- Análisis simultáneo del segmento ST en los tres canales (depresión, elevación y pendiente).
- Gráficos de tendencias en 24/48 hs. de frecuencia cardiaca, intervalo RR, incidencias ventriculares, incidencias supraventriculares y segmento ST por cada canal.
- Histogramas de RR, PR y ST por cada canal.
- Tablas con sumarios de 24/48 hs.
- Editor de morfologías.
- Validación y reclasificación de todos los eventos.
- Análisis de Variabilidad de Frecuencia. (\*)
- Análisis de QT. (\*)
- Generador de reporte con vista previa.
- Almacenamiento de las grabaciones de holter y de los reportes analizados.
- Posibilidad de importar y exportar grabaciones de holter.
- Software en español/inglés/portugués bajo Windows 98 SE/ME/ 2000/XP/VISTA.

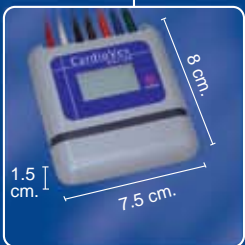

(\*) opcional

### Impresión del informe final:

- Trazado electrocardiográfico comprimido de 20, 30, 60 o 120 minutos por hoja.
- Hoja de trazados estándar de 25 mm/seg. con grilla milimetrada.
- Gráfico de tendencias e histogramas durante las 24/48 hs.
- Sumario de arritmias para cada hora y durante las 24/48 hs.
- Gráficos de Variabilidad de Frecuencia y QT. (\*)
- Posibilidad de guardar informes en formato PDF.

**Requerimientos mínimos de sistema:** • Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, XP o Vista  
• Procesador Pentium II 500Mhz • 64 MB RAM • Disco rígido de 10 GB  
• Monitor SVGA 800x600 o mejor • Impresora compatible.

 **veccsa**

Juramento 5841 (1431) Buenos Aires - Argentina  
Tel. (5411) 4572-7004 Fax: (5411) 4572-0045  
E-mail: info@veccsa.com Web: www.veccsa.com

[www.cardiovex.com.ar](http://www.cardiovex.com.ar)



0434