
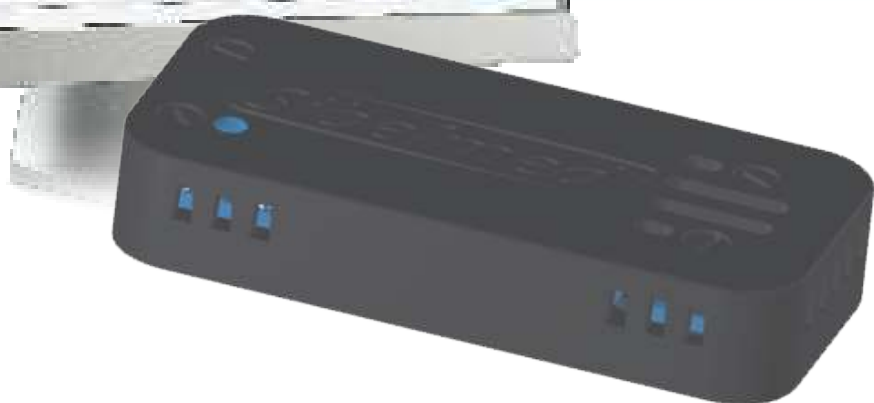


Sibelmed®

ESTACIÓN METEOROLÓGICA USB SIBELMED

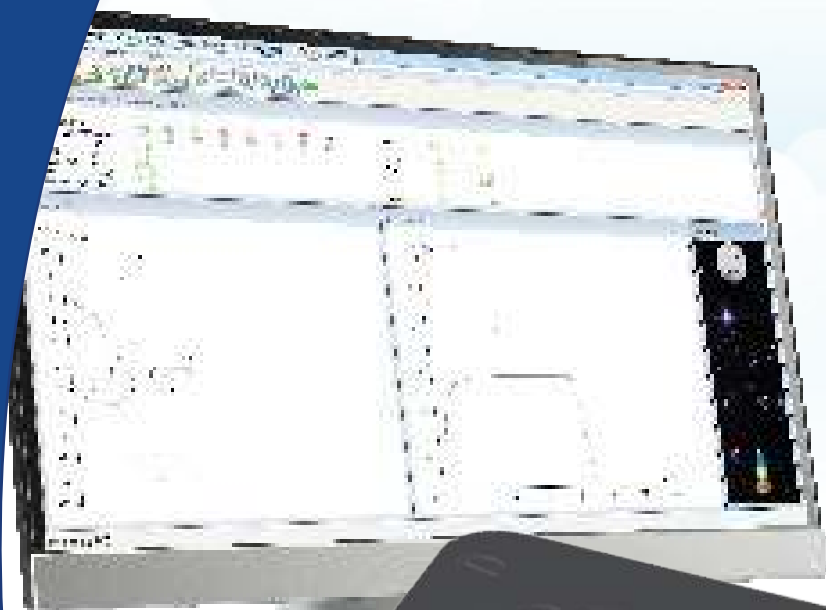

 34 x 70 x 12,5 mm.

 100 g.



Temperatura



Presión



Humedad

www.sibelmed.com

USB SIBELMED · estación meteorológica

Descripción

La Estación Meteorológica **USB Sibelmed** permite medir los datos meteorológicos de temperatura, presión y humedad con una gran precisión.

	Rango	Precisión (%)
Temperatura (°C)	5 - 40	+/- 0.2
Presión (hPa)	250 - 1060	+/- 1,5
Humedad (%HR)	10 - 90	+/- 2

La estación meteorológica USB Sibelmed se conecta al puerto USB del ordenador y envía los datos meteorológicos de manera continua.

Es compatible con el software W20s y, por tanto, con todos los espirómetros Sibelmed.

El software recoge los datos de la estación de forma automática cada vez que se realiza una espirometría o una calibración.

Tecnología Plug & Play.

El software detecta automáticamente la estación meteorológica, sin necesidad de instalación ni configuración.



Portátil

Accesorio ligero y pequeño, que dispone de una superficie imantada para colocarlo en la superficie del ordenador.



Obtención de la presión, temperatura y humedad

Corrección automática BTPS al inicio de cada prueba/calibración.



LED azul

Indica que la estación meteorológica está en funcionamiento.

No necesita pilas

Se alimenta a través del cable USB.



Compatible

Con la versión 2.09 del software W20s y posteriores.



Válido para el sistema operativo Windows

VISTA, 7, 8.1 y 10.



SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11

www.sibelmed.com



CE

EN 61010-1:2010



EN ISO 9001:2015

